

Suomi

iCare HOME2

iCare HOME2
Pikaopas

Pikaopas

icare



Lue tämä pikaohje ja katso HOME2-käyttöohjevideo ennen silmänpainemittarin käyttöä. Noudata ohjeita vaihe vaiheelta.



Lue käyttöohjeen luvussa 1 olevat turvallisuustiedot ennen silmänpainemittarin käyttöä.

Jos tarvitset apua iCare HOME2 -silmänpainemittarin käyttämisessä, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.



HUOMAUTUS! Päivitä silmänpainemittarin aika-asetukset ennen mittauksia paikalliseen aikaan manuaalisesti silmänpainemittarin asetuksista tai automaattisesti yhdistämällä silmänpainemittari iCare PATIENT2 -sovellukseen tai iCare EXPORT -ohjelmistoon.




Vaihe

Sivu


1	Paristojen asettaminen paikoilleen	5
2	Anturin asettaminen paikalleen	6
3	Käynnistäminen	7
4	Oikea mittausasento	8
5	Tukien säätäminen ja silmänpainemittarin asettaminen	9
6	Silmänpaineen mittaaminen	11
7	Silmänpaineen mittaaminen selinmakuulla	13
8	Toiminta virhetilanteissa	15
9	Silmänpainemittarin sammuttaminen ja anturin hävittäminen	17

Silmänpainemittarin osat


4

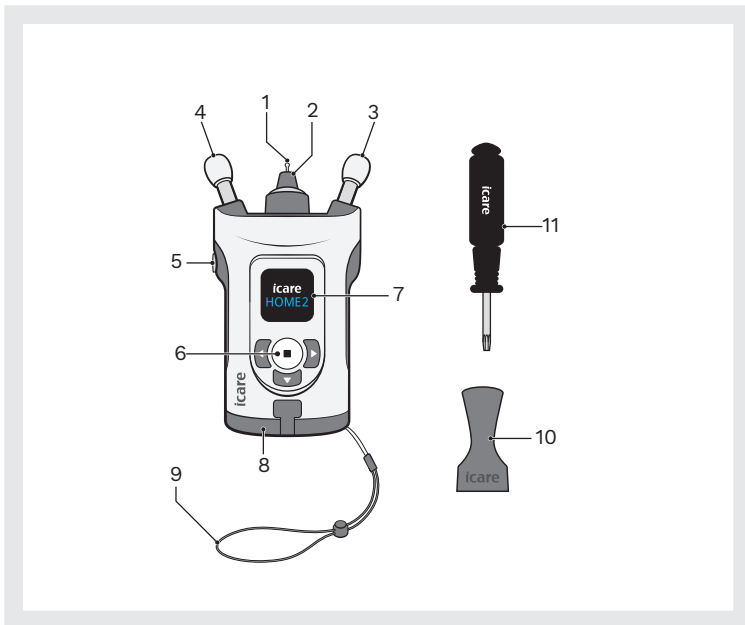


- 1 Anturi
- 2 Anturipesä
- 3 Poskituki
- 4 Otsatuki
- 5 Mittauspainike
- 6 Valintapainike
- 7 Näyttö
- 8 Paristolokeron kansi
- 9 Rannehihna
- 10 Anturin asetin
- 11 Ruuvimeisseli Torx TX8

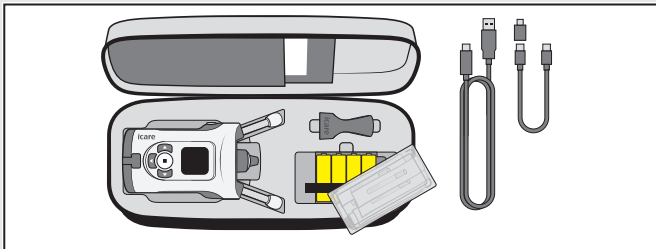


Paristot ovat silmänpainemittarin kantolaukussa anturirasian alla.

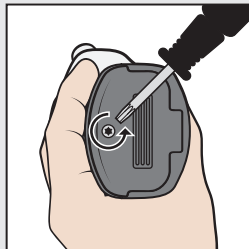


Avaa paristolokeron kansi ruuvimeisselillä.

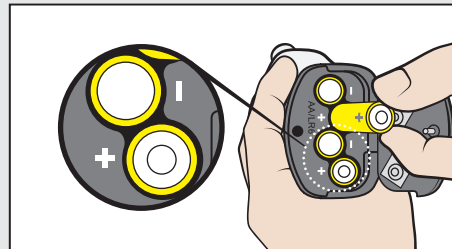


Aseta paristot paikoilleen ja sulje kansi.

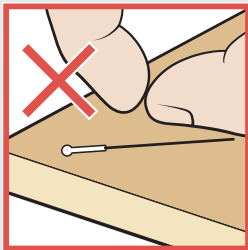


Älä käytä anturia, jos se on koskettanut kättä, pöytää tai muuta epästeriiliä pintaa.

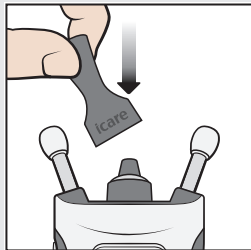

Aseta anturin asetin anturipesän päälle.

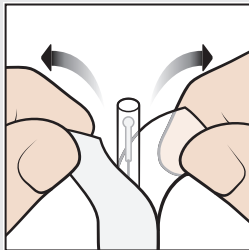


Avaa pakkaus.

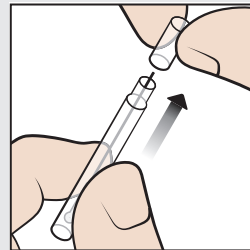


Poista korkki.





VAROITUS! Ehkäise kontaminaatio säilyttämällä käyttämättömät anturit omassa rasiassaan. Älä koske paljasta anturia. Älä käytä anturia, jos se koskettaa epästeriiliä pintaa, kuten esimerkiksi pöytää tai lattiaa.

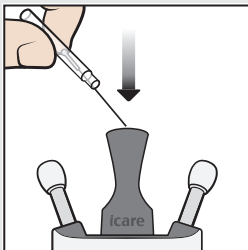

Pudota anturi
anturin
asettimeen.

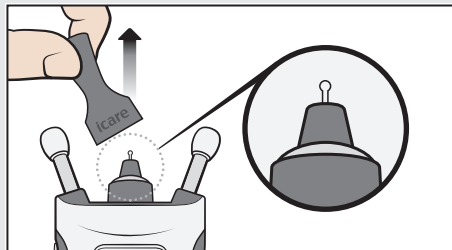


Poista anturin asetin.

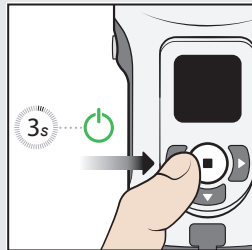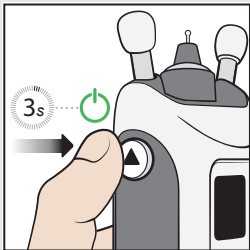


Paina -painiketta, kunnes kuulet äänimerkin. Näytöllä lukee Aloita.


Vaihtoehtoisesti voit painaa -painiketta, kunnes kuulet äänimerkin. Siirry sitten mittaustilaan painamalla -painiketta uudelleen. Näytöllä lukee Aloita.

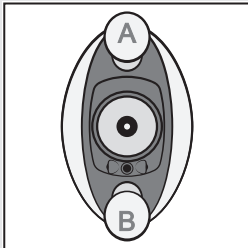

Otsasi on vasten
otsatukea A ja
poskesi vasten
poskitukea B.

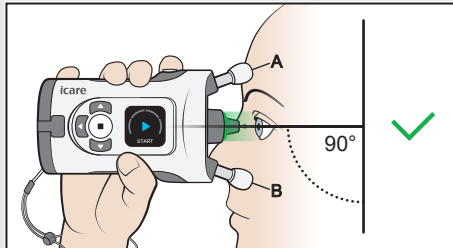


Katso suoraan eteenpäin.
Silmänpainemittari on 90
asteen kulmassa kasvoihisi
nähdessä. Anturi on noin 5 mm
päässä silmästäsi ja osoittaa
kohtisuoraan silmän keskelle.

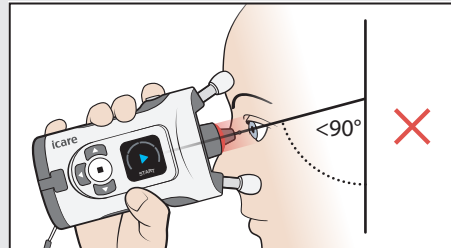


Jos anturipesässä näkyy punainen
valo, silmänpainemittari on liian
kallellaan alaspäin. Suorista ryhti ja
nosta leukaa.


Silmänpainemittarin asettaminen kuvataan
seuraavassa luvussa.

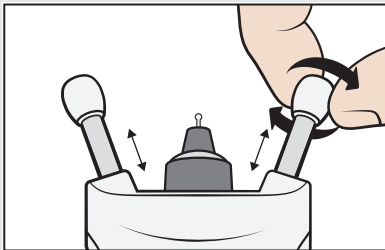

Säädä otsa- ja poskituet oikean pituisiksi ennen mittausta. Aloita tukien enimmäispituudesta.

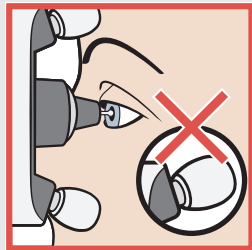


Lyhennä tukia vain kaksi napsautusta kerrallaan, jotta silmänpainemittari ei tule liian lähelle silmääsi.

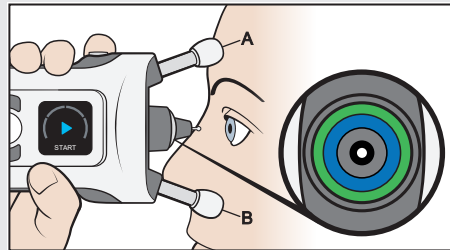


Aseta silmänpainemittari vasten kasvoja ja katso anturipesään. Anturi osoittaa kohtisuoraan silmän keskelle, kun anturipesän siniset ja vihreät renkaat ovat symmetrisiä.




VAROITUS! Vain anturin pitäisi koskettaa silmää. Älä koske silmääsi muilla silmänpainemittarin osilla. Älä töki silmää silmänpainemittarilla.

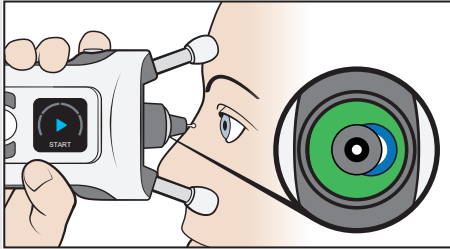


Jos renkaat ovat epäsymmetrisiä, anturi ei osoita kohtisuoraan keskelle silmää. Korjaa silmänpainemittarin asento.

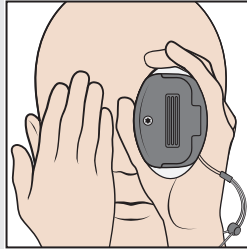


Pidä molemmat silmät auki. Renkaat voivat näkyä paremmin, jos peität sen silmän, jota ei mitata.

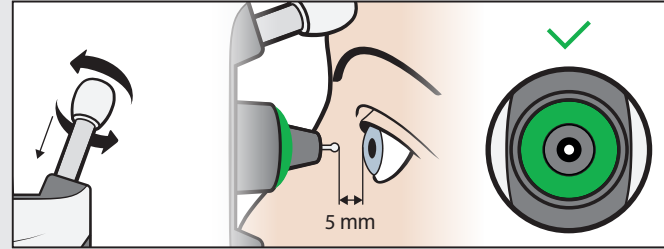


Lyhennä tukia kiertämällä niitä myötäpäivään kaksi napsautusta kerrallaan, kunnes näet vain symmetrisen vihreän renkaan. Silmänpainemittari on nyt oikealla etäisyydellä silmästäsi.

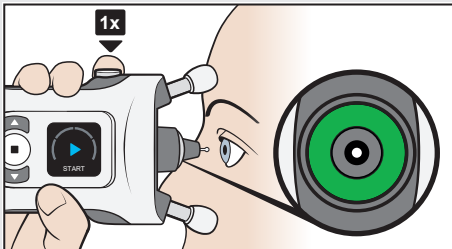


Aloita mittaus, kun näet vain symmetrisen vihreän renkaan. Paina mittauspainiketta (▶) kerran. Anturi koskettaa hellästi silmääsi.

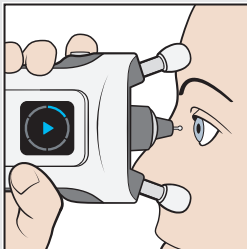

Yksi äänimerkki ilmaisee, että mittaus onnistui. Jatka mittauksen tekemistä, kunnes kuulet pitkän äänimerkin ja anturipesän valo sammuu.

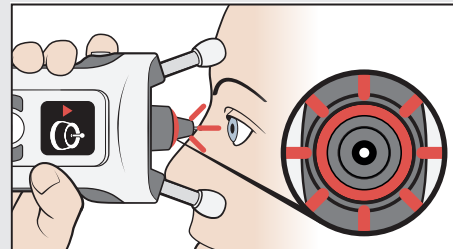


Jos anturipesä vilkkuu punaisena ja kuulet useita äänimerkkejä, mittaus ei onnistunut. Lisätietoja on kohdassa **Toiminta virhetilanteissa** sivulla 17.

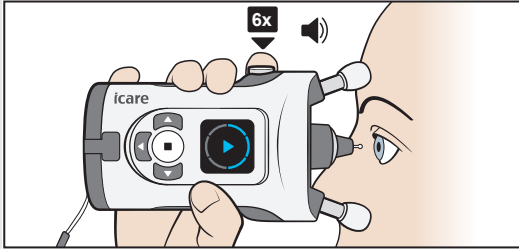


Mittaussarja koostuu kuudesta mittauksesta.


Vihje: Voit ottaa mittaussarjan myös painamalla mittauspainiketta (▶), kunnes kuusi mittaus on tehty.

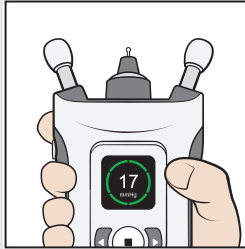


Kun kaikki kuusi mittaus on tehty onnistuneesti, kuulet pidemmän äänimerkin, anturipesän valo sammuu ja näet tuloksen näytöllä.

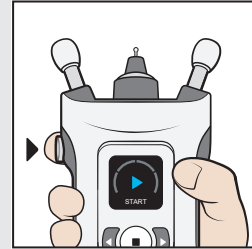


Paina mittauspainiketta (▶) kerran ja toista mittaus toisella silmällä.

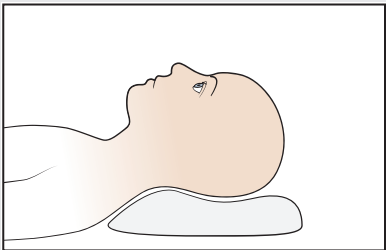


Käy makuulle hetkeksi ennen mittausta.

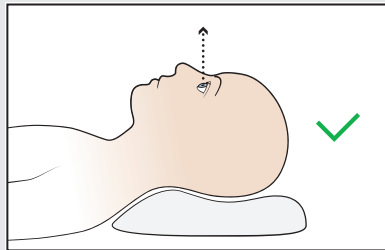


Asetu mukavasti selinmakuulle ja aseta tyyny niskan taakse. Katso suoraan eteenpäin.

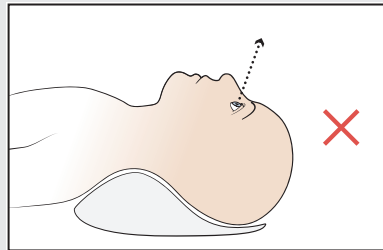


Vältä pään taivuttamista taaksepäin.

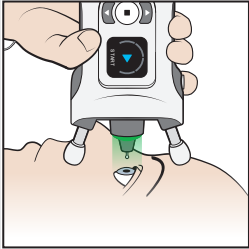

Aseta silmänpainemittari
90 asteen kulmaan kasvoihisi
nähdessä ja tee mittaus edellä
kuvatulla tavalla.

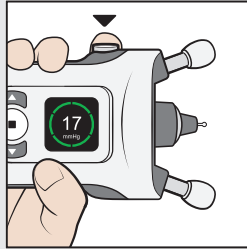


Paina mittauspainiketta
▶ kerran onnistuneen
mittauksen jälkeen ja toista
mittaus toisella silmällä.

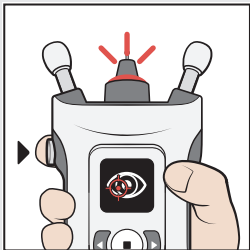


Anturipesä vilkkuu punaisena, jos tapahtuu virhe.
Näyttö ja äänimerkit ilmaisevat virheen syyn.

Katso näyttöä, paina mittauspainiketta (▶) kerran,
tee tarvittavat korjaukset ja toista mittaus.

Kuvake	Näyttöteksti	Ääni	Ongelma	Ratkaisu
	KAUKANA	3 pitkä 	Anturi on liian kaukana silmästä.	Kuittaa virheilmoitus painamalla mittauspainiketta  kerran. Lyhennä otsa- ja poskitukia.
	LÄHELLÄ	5 lyhyttä 	Anturi on liian lähellä silmää.	Kuittaa virheilmoitus painamalla mittauspainiketta  kerran. Pidennä otsa- ja poskitukia.
	VIRHEELLINEN KOHDISTUS	2 lyhyttä 	Anturi ei ollut kohtisuorassa sarveiskalvoon nähden tai anturi osui silmäluomeen tai silmäripsiin.	Kuittaa virheilmoitus painamalla mittauspainiketta  kerran. Aseta silmänpainemittari siten, että anturi osoittaa kohtisuoraan keskelle silmää. Pidä silmä kunnolla auki.
	TOISTA	2 lyhyttä 	Ongelma anturin liikkeessä.	Kuittaa virheilmoitus painamalla mittauspainiketta  kerran. Toista mittaus.
	TUNNISTUSVIRHE	2 lyhyttä 	Anturi ei tunnistanut, mitattiinko oikeaa vai vasenta silmää.	Paina  -painiketta ja sitten  -painiketta, kunnes näytöllä näkyy haluamasi silmä (vasen tai oikea). Paina  tai peruuta mittaus painamalla paluupainiketta.

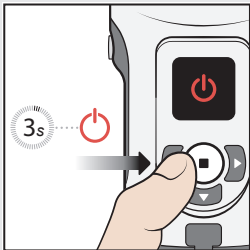


Paina valinta-painiketta (⏻), kunnes kuulet kolme äänimerkkiä ja näyttö sammuu.

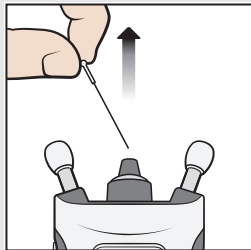

Irrota anturi ja aseta se takaisin anturisäiliöön.



Hävitä anturi säiliöineen sekajätteenä.

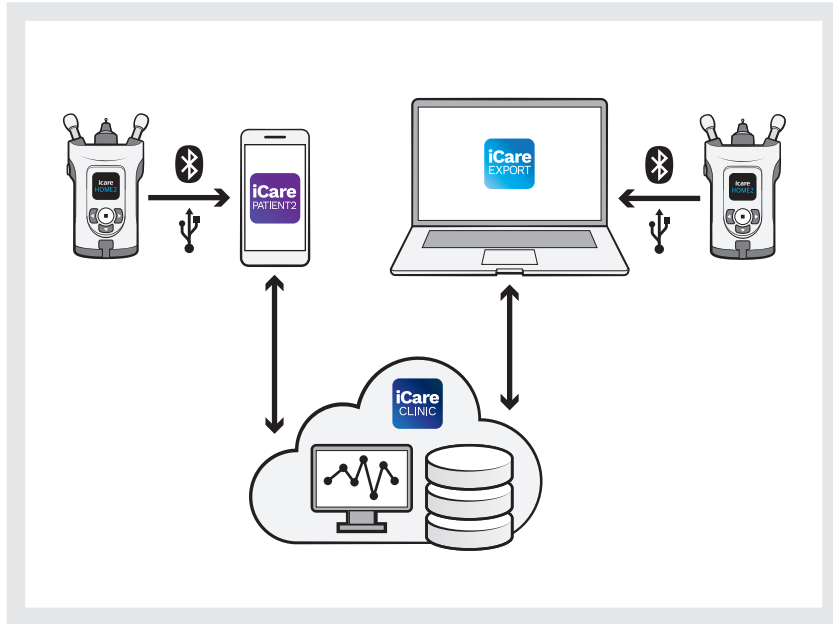

Nyt voit siirtää mittaustulokset lääkärisi iCare CLINIC -palveluun tai yksityiselle iCare CLOUD -tilillesi mobiililaitteen iCare PATIENT2 -sovelluksella tai tietokoneen iCare EXPORT -ohjelmistolla.

**Icare Finland Oy**

Äyritie 22

01510 Vantaa, Suomi

Puh. +358 9 8775 1150

info@icare-world.com



Katso lisätietoja
käyttöohjeesta.

www.icare-world.com**icare**

iCare on iCare Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Icare Finland Oy, Icare USA, Inc., iCare World Australia Pty Ltd ja Centervue S.p.A ovat osa Revenio Groupia ja edustavat iCare-brändiä.

Kaikkia tuotteita, lisävarusteita, palveluita tai tarjouksia ei ole hyväksytty tai tarjolla kaikilla markkina-alueilla, ja hyväksytyt merkinnät ja ohjeet voivat vaihdella maittain. Tuotetiedot voivat muuttua suunnittelussa ja toimituslaajuudessa tapahtuvien muutosten sekä tekniikan jatkuvan kehityksen seurauksena.